



## Dreh- & Aufstehbett «mobilia casa e plus»



## Dreh- & Aufstehbett «mobilia casa e plus»


Das Sitz- und Aufstehbett «mobilia casa e plus» wurde nach besonderen Anforderungen von schwerstpflegebedürftigen Patienten im häuslichen aber auch stationären Bereich entwickelt.

Durch das mobilia Sitz- und Aufstehbett wird dem Patienten die Fähigkeit zurück gegeben, völlig eigenständig oder mit nur minimaler Unterstützung aus dem Bett aufzustehen.

Das Hebesystem ist im Fuss- und Kopfteil integriert. Diese elegante Lösung ermöglicht vor allem eine leichte Unterfahrbarkeit des Bettes von Liftanlagen, erleichtert aber auch die Reinigung unter dem Bett.

### Produktdetails

- vollelektrische Liegeflächenverstellung mit Aufstehhilfe
- vollelektrische Dreh- und Aufstehfunktion
- Liegeflächendrehung beidseitig wählbar
- elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne sowie Höhenverstellung und

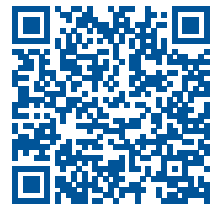

## Aufstehhilfe

- mit Lifter unterfahrbar
- Liege- und Sitzhöhe von 40–80 cm stufenlos elektrisch verstellbar
- Das Hebesystem ist im Fuss- und Kopfteil integriert. Diese elegante Lösung ermöglicht vor allem eine leichte Unterfahrbarkeit des Bettes von Liftanlagen, erleichtert aber auch die Reinigung unter dem Bett.

## Vorteile

- Für die Pflege zu Hause oder auch im Heim
- Der Patient/zu Pflegenden kann völlig eigenständig oder mit nur minimaler Unterstützung aus dem Pflegebett aufstehen
- Unterstützt das selbständige Hinlegen in das Pflegebett
- Deutliche Verbesserung der Mobilität durch drehbare Liegefläche und zusätzlicher Aufstehfunktion
- Vereinfachung und Entlastung der Pflege Tätigkeit von Angehörigen, Pflegepersonal und Patienten
- Verbesserung der Eigenständigkeit des zu Pflegenden
- Mobilisation/Transfers der Patienten wird erheblich erleichtert und von den Pflegebedürftigen als angenehm empfunden
- Der Patient bewegt sich regelmässiger und nimmt wieder mehr und aktiv am Leben teil
- Gibt dem Patienten Unabhängigkeit vom Pflegepersonal und spart damit Pflegekosten
- Beugt Arbeitszeitausfall und Berufskrankheiten beim Pflegepersonal vor
- Fördert die aktive Teilnahme des Pflegebedürftigen, da selbständiges Essen, Sitzen und Aufstehen möglich ist
- Stärkung der Herz- und Kreislauffunktionen
- Selbsterklärende Bedienung
- Transferaktionen werden vereinfacht
- Mit Patientelifter unterfahrbar
- Hohe Sicherheit durch Beachtung des MPG
- Handschalter sperrbar
- Made in Germany

## Basisausstattung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilte Liegefläche mit Holzlattenrost
- Aussenmasse: 103 x 220 cm
- Liegeflächenverstellung: E-Motor
- Liegeflächendrehung: beidseitig wählbar Drehung links/rechts
- Rollenfeststellung: 100er Rollen Einzelradfeststellung
- Höhenverstellung: 40–80 cm, stufenlos elektrisch verstellbar
- Holzumbau: Buche-Dekor natur



- Seitengitter: ohne Seitengitter
- Armlehnen: ohne Armlehnen
- Antrieb: Motor IP 54 ohne Netzfreeschaltung
- Hub: Frontenhub
- Gewicht: ca. 125 kg
- Lieferumfang: inkl. Matratze, Spannbezug, Aufrichter und Griff
- Sichere Arbeitslast: 135 kg
- Max. Personengewicht: 100 kg

## **Sonderausstattung auf Anfrage möglich**

- Holzdekore z.B. Kirsche, Ahorn, Nussbaum etc.
- Liegefläche mit Stahlgitter
- Metallbeschichtung in anderen RAL-Farben
- verkürzte Liegefläche
- andere Liegeflächenbreiten
- Seitengitter
- Armlehnen



## Produktvariationen

SKU	Liegefläche	Lieferung	Preis
	drehung-nach-links	selbstabholer-fr-0-00	CHF 6'890.00
	drehung-nach-links	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 7'060.00
	drehung-nach-links	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 7'110.00
	drehung-nach-links	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 7'160.00
	drehung-nach-rechts	selbstabholer-fr-0-00	CHF 6'890.00
	drehung-nach-rechts	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 7'060.00
	drehung-nach-rechts	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 7'110.00
	drehung-nach-rechts	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 7'160.00