



## Allround Rollator «Saljol» mit Vollausrstattung



### Allround Rollator «Saljol» mit Vollausrstattung

Leichter und wendiger Outdoor-Rollator mit Vollausrstattung: Ruckengurt, Netztasche, Stockhalter, Klingel und LED-Licht.

Der Allround Rollator aus Aluminium ist ein echtes Multitalent: Ein Crossover-Rollator, mit dem man wendig, leicht und schick in der Stadt unterwegs ist. Stabil und gut gefedert zeigt er sich auf unebenen Wegen auf dem Land.

Sicher unterwegs auf jedem Untergrund!

### Highlights



- Premium Qualität mit Vollausrüstung
- Gesamtpaket mit Rückengurt, Netztasche, Stockhalter, Klingel und LED-Licht
- Mehr Fahrkomfort dank stossabsorbierender All-Terrain-Reifen und extragrosser Vorderräder
- Gewicht ohne Zubehör nur 6.4 kg
- Umbaubar von Zweihand- zu Einhandbremse, z.B. nach einem Schlaganfall
- Den Allround Rollator gibt es in zwei verschiedenen Sitzhöhen.

## Technische Details | Produkteigenschaften

- Gewicht: 6.4 kg exkl. Netztasche
- Körpergrösse: 145–170 cm | 160–200 cm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Sitzbreite: 46 cm
- Sitzhöhen: 54 cm | 62 cm
- Max. Stützhöhe: 103 cm
- Min. Stützhöhe: 81 cm
- Breite offen: 61 cm
- Breite gefaltet: 21 cm
- Max. Zuladung der Netztasche: 5 kg

## Ausrüstung

- Armlehne: Armlehne aus Kork-TPE zum Schonen der Arme
- Bremssystem: Standardbremsen mit Möglichkeit zum Umbau auf Einhand-Simultanbremse; im Lieferumfang enthalten
- Rückengurt
- Stockhalter
- LED-Licht
- Netztasche
- Klingel
- Bereifung: Geschäumte All-Terrain-Reifen; extragrosse stossdämpfende Vorderräder mit Profil
- Geeignet für: Jeden Untergrund, auch unebene Strassen und holprige Wege
- Verladung, Transport:
- Gewicht richtig austariert
- Gegen Aufklappen gesichert



- Transportgriffe aus Kork-TPE
- Reflektoren: Über 30 Reflektoren; Sicherheit im Dunkeln durch bessere Sichtbarkeit
- Garantie: 2 Jahre; bei Registrierung auf [www.saljol.de](http://www.saljol.de) 4 Jahre
- Kostenübernahme Krankenkasse: Zuschuss von der Krankenkasse möglich

## Geeignet für

- Draussen
- Einkauf
- Land
- Stadt
- Sturzprophylaxe

## Premium Qualität mit Vollausrüstung

Das Gesamtpaket umfasst den hochwertigen Saljol Allround Rollator, einen verstellbaren Rückengurt, eine Netztasche, einen Stockhalter, eine Klingel und ein LED-Licht. Schieben Sie lediglich den Rückengurt in die vorgesehene Halterung – und schon ist Ihr Premium Rollator bereit für den ersten Einsatz. Alle weiteren Komponenten der Vollausrüstung sind bereits sicher am Rollator befestigt.

## Jede Menge Extras – und alles im Lieferumfang enthalten!

Bei Ihrem Saljol Allround Rollator soll es Ihnen an nichts fehlen! Denn bei ihm ist wirklich alles dabei:

Der grössenverstellbare Rückengurt bietet eine sehr breite und hohe Anlagefläche, die das Sitzen deutlich bequemer macht. Eine besonders grosse Aussparung ermöglicht ausserdem die uneingeschränkte Sicht auf den Gehweg. Ein Reflektorstreifen am Gurt sorgt zudem für mehr Sichtbarkeit.

In der praktischen Netztasche verstauen Sie Ihre Einkäufe oder alle nötigen Utensilien für Ihren nächsten Ausflug wie Trinkflasche, Fernglas oder Regenjacke. An ihr ist auch das LED-Licht befestigt, dass Sie sicher durch Dämmerung und Dunkelheit begleitet.

Am Griff bereits montiert ist der universelle Stockhalter. Er passt sich flexibel an verschiedene Gehhilfen und Gehstöcke an. Mit einem einzigartigen Arretierungssystem bleibt der Stock sicher



fixiert und ist stets griffbereit. Durch ein Klickgeräusch hören Sie, dass der Stock sicher befestigt ist.

Mit der Klingel, die ebenfalls am Griff vormontiert ist, machen Sie sich im Strassenverkehr bemerkbar und sind so sicher unterwegs.

## **Korkfarbene Designelemente führen durch die Funktionen der Saljol Rollatoren**

Das Design erleichtert Ihnen dank korkfarbener, brauner Komponenten die intuitive Bedienung. Alle verstellbaren Elemente erkennen Sie dadurch sofort und ermöglichen Ihnen eine schnelle, sichere Anpassung an Ihren Bedarf. Die durchdachte Farbgestaltung sorgt für Übersichtlichkeit und maximalen Komfort im Alltag.

## **Bringen Sie Farbe in Ihr Leben mit den Saljol Allround Rollatoren**

Die neuen Farben unseres Rollators sind weit mehr als ein dekoratives Detail. Sie stehen für Individualität, Selbstbewusstsein und Lebensfreude. Jede Farbe erzählt eine Geschichte, setzt ein Zeichen und spiegelt ein Lebensgefühl wider. Denn Mobilität ist nicht nur praktisch – sie darf auch stolz, mutig und stilvoll sein.

## **Überzeugen Sie sich selbst, was der Saljol Allround Rollator zu bieten hat**

Ob im Alltag oder auf Reisen, in der Stadt oder auf unebenem Gelände: Ein guter Rollator unterstützt nicht nur – er begeistert. Der Saljol Allround Rollator verbindet durchdachte Technik mit aussergewöhnlichem Design. Für alle, die Wert auf Komfort, Sicherheit und Stil legen – und die Freiheit lieben, selbstbestimmt unterwegs zu sein.

## **Leicht zu transportieren und zu manövrieren**

Der Rollator wiegt ohne Zubehör nur 6.4 kg und ist somit leichter als die meisten Alu Rollatoren und sogar als viele seiner Artgenossen aus Carbon. Das macht ihn in der Stadt besonders wendig. Und er lässt sich auch mal Treppen hoch- oder runterheben, wenn die Rolltreppe oder der Lift nicht funktioniert.

Das einzigartige Design des Rahmens und die edlen Farben machen den Rollator zum Blickfang und zu einem Must-have für alle, die das Besondere lieben. Die einfach abnehmbare Netztasche kann bis 5 kg beladen werden und fügt sich perfekt in den schicken Look ein.



## **Stossdämpfende Griffe**

Komfort darf bei einem Allround Rollator natürlich nicht fehlen. Die Schiebegriffe sind aus hautfreundlichem Kork-TPE und somit stossdämpfend, wärmeabsorbierend und rutschfest. Grosse Armauflagen, ebenfalls aus Kork-TPE, verhindern beim Sitzen auf dem Rollator Druckstellen an den Unterarmen.

## **Einzigartiges Bremssystem**

Ein weiteres Highlight des Saljol Allround Rollators, das es so nicht auf dem Markt gibt, ist das optionale Einhandbremssystem. Der Aluminiumrollator ist serienmässig mit einer Standard-Zweihandbremse ausgestattet, die bei Bedarf in eine Einhand-Simultanbremse umgebaut werden kann. Ein riesiger Vorteil für alle, die nicht mehr die volle Kraft in beiden Händen besitzen. Das dazu nötige, längere Bowdenzugkabel schicken wir Ihnen auf Anfrage kostenlos zu.

## **Nachrüstbare Schleifbremse – Ihr Rollator passt sich Ihren Bedürfnissen an**

Wünschen Sie sich mehr Sicherheit und Kontrolle beim Gehen? Mit der nachrüstbaren Schleifbremse (Zubehör für Ihren AR) behalten Sie stets die Kontrolle. Der individuell einstellbare Rollwiderstand der Hinterräder sorgt für sanftes Bremsen ohne Blockieren (ABS) und verhindert, dass Ihr Rollator zu schnell wird – besonders auf abschüssigem Gelände.

Diese Bremse bietet Ihnen optimale Unterstützung bei Gangunsicherheiten, gleicht unerwünschte Richtungsabweichungen aus und minimiert das Sturzrisiko. Nach der einmaligen Einstellung lässt sie sich bequem mit dem Fuss (de)aktivieren.

## **Sicher unterwegs auf jedem Untergrund**

Geschäumte All-Terrain-Reifen sorgen für ein besseres Fahrgefühl und federn Stösse auf holprigen Wegen ab.

Hindernisse oder Schotterwege lassen sich dank der extragrossen Vorderräder mit einem Durchmesser von 250 mm leichter bewältigen.

Die Struktur des Reifenprofils ermöglicht darüber hinaus eine besonders gute Bremsleistung.

## **Perfekt ausgestattet**



Selbstverständlich wurde beim Allround Rollator der hohe Standard des Carbon Rollators in Sachen Funktionalität und Sicherheit beibehalten und sogar noch verbessert.

Für bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung und oder im Dunklen ist der Rollator mit mehr als 30 Reflektoren an Rahmen, Griffen, an der Ankipphilfe und der Tasche ausgestattet.

Spezielle Anti-Rutsch-Pads auf der Ankipphilfe sorgen ausserdem dafür, dass der Schuh beim Ankippen des Rollators nicht abrutscht.

Um funktionale Bestandteile des Rollators hervorzuheben, haben diese eine Kork-TPE-Beschichtung erhalten und sind an ihrer Korkfarbe gut erkennbar.

Wie auch der Carbon Rollator hat der Aluminium Rollator ein Sitznetz für Verschnaufpausen, die Griffe sind höhenverstellbar und er verfügt über eine Feststellbremse. Der Rollator lässt sich auf ein sehr klein zusammenklappen und mit dem Verschlusshaken sichern.

## **So finden Sie die richtige Grösse für Ihren «Saljol» Allround Rollator**

Unsere Allround Rollatoren gibt es in zwei verschiedenen Grössen: AR54 und AR62. Die Zahlen 54 und 62 stehen für die Höhe des Sitznetzes, also 54 cm und 62 cm. Die richtige Grösse herauszufinden, ist ganz leicht.

### **1. Masse ermitteln**


Messen Sie zunächst Ihre Körpergrösse und Ihre Stützhöhe. Je nachdem, wie sicher Sie sich beim Stehen oder Bücken fühlen, können Sie die Masse allein nehmen oder bitten am besten einen Angehörigen, einen Physiotherapeuten, eine Pflegekraft oder einen Sanitätshausmitarbeiter um Hilfe.

#### **Wie gross sind Sie (A)?**

Messen Sie Ihre gesamte Körpergrösse.

#### **Wie ist Ihre Stützhöhe (B)?**

Messen Sie den Abstand vom Boden bis zum Handgelenk, aufrechte Haltung, Arme locker hängen lassen.

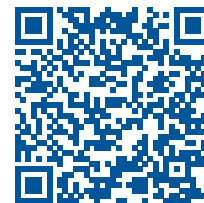

## 2. Vergleichstabelle nutzen

Vergleichen Sie nun Ihr Mass mit der folgenden Liste und finden Sie die für Sie passende Grösse.

Körpergrösse (A): 145-170 cm

Stützgrösse (A): 76-88 cm

>> *Ihr passender Rollator: AR54 (Sitzhöhe: 54 cm)*

Körpergrösse (B): 160-200 cm

Stützhöhe (B): 81-103 cm

>> *Ihr passender Rollator: AR62 (Sitzhöhe: 62 cm)*

Sind Ihre Masse nicht genau einer Rollatorgrösse zuzuordnen? Unser Vertriebs- und Serviceteam berät Sie gerne unter Tel. 0800 800 123 oder Sie schreiben eine E-Mail an [info@rehasys.ch](mailto:info@rehasys.ch)

[Hier können Sie sich den Grössenguide für den Allround Rollator auch als Dokument herunterladen.](#)

### Die richtige Sitzhöhe und Position

Wichtig: Aktivieren Sie immer zuerst die Feststellbremsen Ihres Rollators, wenn Sie sich auf Ihren Rollator setzen möchten.

Beim Sitzen auf dem Rollator ist es wichtig, dass Sie beide Füsse flach auf dem Boden abstellen können. Ihre Knie sind angewinkelt. Ihre Arme können Sie entspannt auf den Rollatorgriffen bzw. den Armauflagen ablegen. Erhöhte Sicherheit bietet Ihnen ein Rückengurt, den Sie als Zubehör erwerben können.

### So stellen Sie Ihren Rollator richtig auf Ihre Grösse ein

Wichtig: Aktivieren Sie immer zuerst die Feststellbremsen Ihres Rollators, bevor Sie etwas an Ihrem Rollator ändern, einstellen oder (ab)montieren.

### Die richtige Griffhöhe

- Stellen Sie sich nah an Ihren Rollator. Lassen Sie die Arme locker hängen, sodass diese



---

leicht gebeugt sind. Beide Füße stehen dabei fest auf dem Boden.

- Die Schiebegriffe sind perfekt eingestellt, wenn sie sich auf Höhe Ihrer Handgelenke befinden.

## **So verstellen Sie die Griffhöhe beim Allround Rollator**

Öffnen Sie die Handschrauben neben dem Sitznetz. Auf der Innenseite der Stützholme finden Sie eine Höhenskala. So stellen Sie sicher, dass beide Griffe gleich hoch sind. Drehen Sie dann beide Schrauben wieder handfest zu.

## **Zubehör für den Allround Rollator**

Zum Rollator gibt es individuelles Zubehör von der Klingel bis zur praktischen Tasche. Hier finden Sie ihr passendes Accessoire für Ihren Rollator, damit auch alles perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



## Produktvariationen

SKU	Sitzhöhe	Farbe	Preis
4058789015421	54-cm	barolo-red	CHF 565.00
4058789014769	54-cm	forest-green	CHF 565.00
4058789015193	54-cm	magic-black	CHF 565.00
4058789015179	54-cm	pearl-grey	CHF 565.00
4058789015414	62-cm	barolo-red	CHF 565.00
4058789014752	62-cm	forest-green	CHF 565.00
4058789015186	62-cm	magic-black	CHF 565.00
4058789015162	62-cm	pearl-grey	CHF 565.00